


Specialanpassad produkt

aixstent® CRE

Kolon-rektum-stent

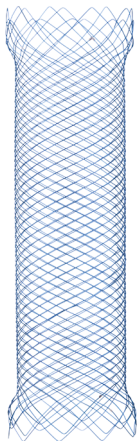

bess pro gmbh

Gustav-Krone-Str. 7

D—14167 Berlin

Germany



Leufen Medical GmbH

Gustav-Krone-Str. 7

D—14167 Berlin

Germany

Tel.: +49 30 816 90 93 00

Fax: +49 30 816 90 93 93

www.leufen-medical.eu

contact@leufen-medical.eu



a bess group company

1 Bästa patient!

Du har fått ett implantat av typen aixstent CRE (specialanpassad produkt). För din egen säkerhets skull ska du läsa detta dokument med patientinformation noga och förvara det på en säker plats. Kontakta den läkare som behandlade dig om du har några frågor.

2 Om detta dokument

2.1 Förklaring av symboler

Symbol	Förklaring
	MR-osäker
	Artikelnummer
	Satskod
	Unikt produkt-ID (UDI)
	Tillverkare
	Distributör
	Patientens namn
	Datum för implantation
	Namn på implanterande klinik/vårdgivare
	Webbplats med patientinformation

Tab. 1: Förklaring av symboler som används

2.2 Märkning av säkerhetsanvisningar

VARNING

Bristande följsamhet kan leda till allvarliga personskador, allvarligt försämrat allmäntillstånd eller dödsfall.

2.3 Ytterligare information

Länk för nedladdning av dokument med patientinformation: ¹⁾	www.leufen-medical.eu/pi/cmlmpi0001
Denna patientinformation baseras på följande bruksanvisning:	CMLMGB0001-3

¹⁾ Uppdateras löpande.

Du hittar artikelnumret och satskoden för implantatet på ditt implantatkort.

3 Att tänka på

1. Ha alltid ditt implantatkort med dig. Visa ditt implantatkort och dokumentet med patientinformation för den behandlande läkaren innan du genomgår eventuella diagnostiska procedurer eller behandlingar.
2. Säkerställ att avföringen alltid är mjuk.
3. Kontakta läkaren om du upplever ett eller fler av följande symtom: Främmandekroppskänsla, smärta (även smärtsamt behov av att behöva gå på toaletten), blödningar, svart avföring, feber
4. Gå på de besök du har bokat med den behandlande läkaren för kontrollundersökningar och följ alla anvisningar angående eventuell nödvändig eftervård.

VIKTIGT: Din aixstent CRE måste kontrolleras regelbundet av den behandlande läkaren. Var noga med att komma till dina inbokade kontrollundersökningar och att följa läkarens råd om nödvändig eftervård. Det är extra viktigt om den avsedda livslängden på din aixstent CRE har uppnåtts ([►Förväntad livslängd, Sida 3]).

4 Produktbeskrivning

4.1 Allmän information

- Självexpanderande vävd metallstent
- Atraumatiska ändar
- Röntgenmarkörer av tantal (beroende på specifikation)

4.2 Material med potentiell patientkontakt

Produkt (del)	Material	Kontaktperson	Typ av kontakt
Stag	100 % nickel-titanlegering ¹⁾	Patient	Med varje användning
Röntgenmarkörer	100 % tantal	Patient	Med varje användning

¹⁾ Potentiellt sensitiserande/allergent material

5 Avsedd användning

5.1 Avsett ändamål

Stenten är avsedd att upprätthålla eller möjliggöra öppenhet hos naturliga och artificiella lumen i kroppen och/eller att täcka patologiska förändringar.

5.2 Patientmålgrupp

Produkten är avsedd för följande patientgrupper:

- Vuxna
- Patienter av alla kön

Specialanpassad produkt. Den förskrivande läkaren/inrättningen måste kontrollera och bekräfta att produkten är lämplig för patienten.

5.3 Förväntad livslängd

Produktens förväntade livslängd: 12 månader

Produkten är avsedd att lämnas kvar i kroppen.

6 Möjliga komplikationer och biverkningar

Följande kända produktspecifika komplikationer finns:

- Stentbrott
- Blödningar
- Perforeringar
- Stenos på grund av otillräckligt expanderad stent
- Stentrubbing
- Vävnadsinväxt
- Infektion/feber
- Främmandekroppskänsla
- Ihållande smärta
- Restenos vid fortsatt tumörtillväxt
- Stentocklusion
- Tenesmus (schmerzhafter Stuhl- / Harndrang)

Ytterligare kända komplikationer som vid endoskopiska ingrepp.

Variationer i komorbiditet och komplikationer för olika individer kan leda till att det blir svårare att hantera vissa komplikationer. I sällsynta och extrema fall kan detta leda till dödsfall.

7 Kombination med andra metoder

VARNING

- Laserbehandling, argonplasmabehandling, HF-kirurgi, kryobehandling och andra metoder som baseras på värme eller kyla: Använd inte metoden i direkt kontakt med produkten.
I annat fall kan vävnads- och produktskador uppstå.
- Produkten har inte konstaterats vara MR-säker. Därför ska produkten betraktas som MR-farlig och får inte föras in i MR-fält. Några möjliga följder av att MR-farliga produkter används i MR-fält: Uppvärmning av produkten, elektromagnetiska urladdningar, följdskador på grund av krafter som produkten utsätts för, avbildningsstörningar (även i omgivande vävnad).

Cellgiftsbehandling, strålbehandling eller andra metoder för vävnadsreduktion kan rubba stenten.

8 Andra återstående risker

Utöver de angivna säkerhetsinstruktionerna, möjliga komplikationerna och biverkningarna finns inga andra kända återstående risker.