


Bronchoskop- Stabilisierungssysteme (BSS)

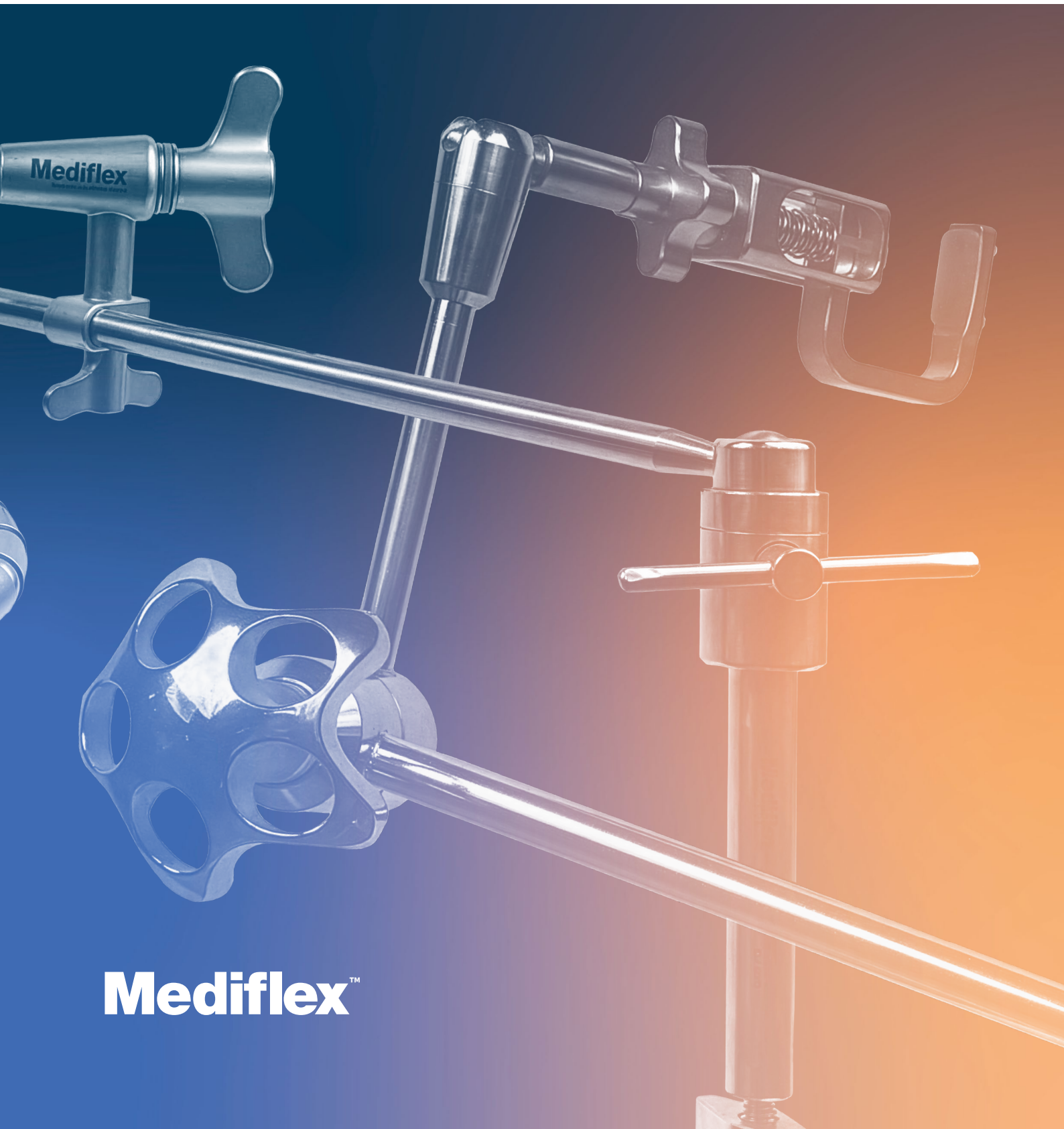

Mediflex™

Zentraler
Spannmechanismus

BSS

Silikoneinlagen

BSS Flex
mit flexiblem Arm




Bronchoskop- Stabilisierungssysteme (BSS)

Präzision dank Stabilität

Die Bronchoskop-Stabilisierungssysteme von Mediflex bieten eine innovative Lösung zur sicheren Fixierung des Bronchoskops während diagnostischer und therapeutischer Eingriffe. Die stabile Positionierung des Instruments erlaubt größere Präzision, steigert die Effizienz und verbessert die Sicherheit für Anwender und Patienten.

Design


- **Stabile Fixierung:** Das System hält das Bronchoskop statisch. Die Qualität der diagnostischen Ergebnisse kann dadurch gesteigert werden.
- **Ergonomisches Design:** Ein zentraler Spannmechanismus ermöglicht die gleichzeitige Kontrolle von drei Gelenken für eine einfache und präzise Ausrichtung.
- **Sicherer Halt:** Silikoneinlagen sorgen für schonenden Kontakt mit dem Instrument und seinen sicheren Halt.
- **Flexible Anpassung:** Höhenverstellbarer vertikaler Stützarm für unterschiedliche Patientenpositionen und Bildgebungsplattformen.
- **Robuste Befestigung:** Tischklemmen mit Schienensegment für sichere Fixierung am OP-Tisch; optionale Schienenklemme für Betten ohne integrierte Schiene.




Vertikaler
Stützarm

The image shows a close-up of the Mediflex bronchoscope stabilization system. It features a vertical support arm with a central spanner mechanism. The arm is mounted on a table clamp with a sliding segment. The device is black and has 'Mediflex' branding and technical specifications printed on it.

Tischklemme mit
Schienensegment

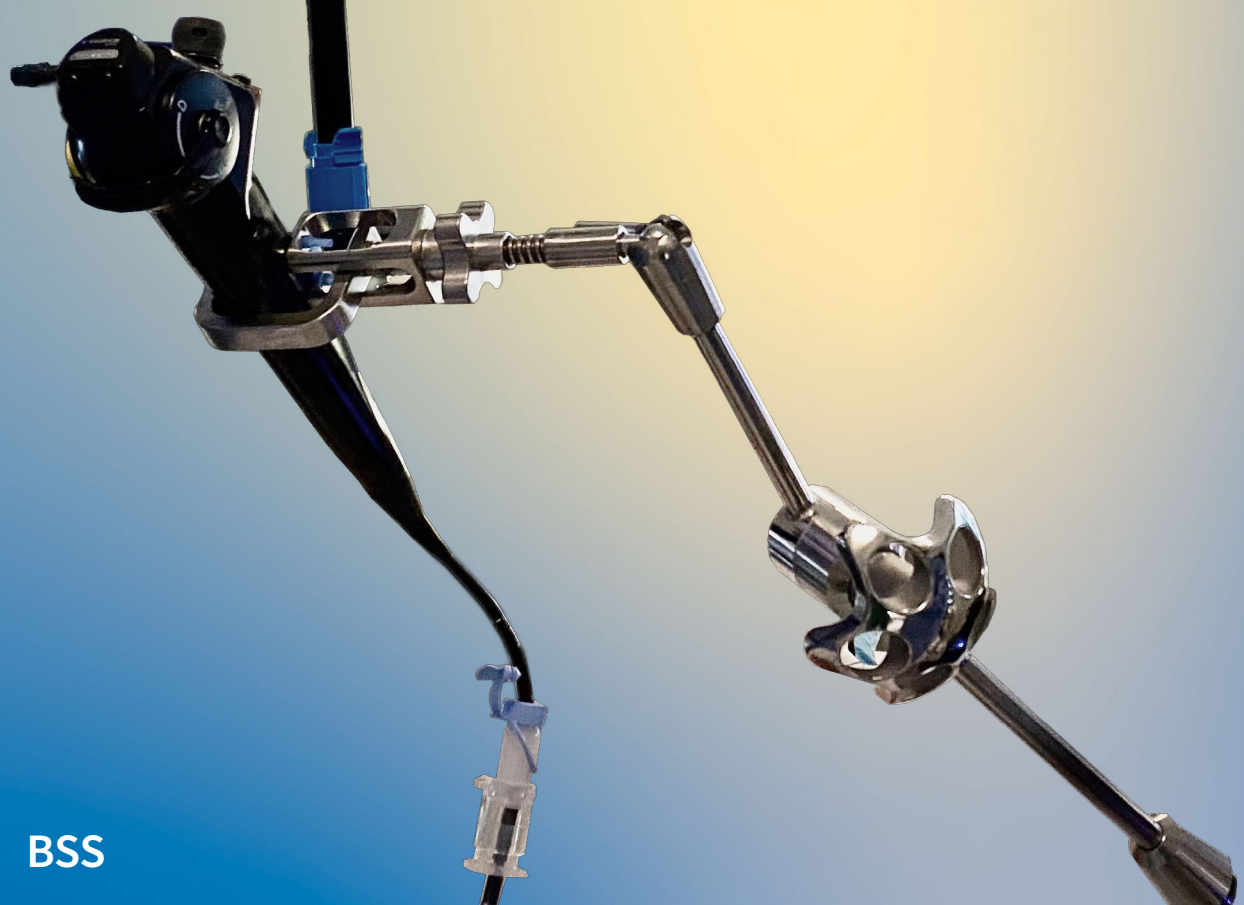

BSS

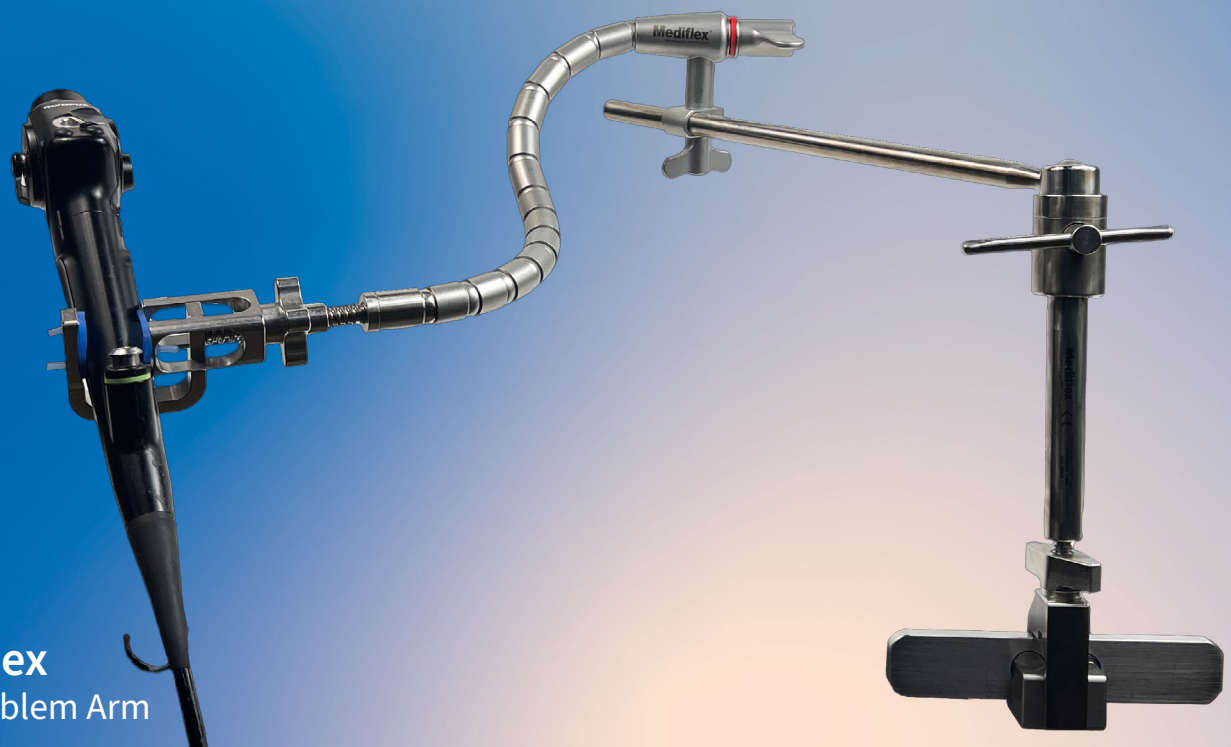

BSS Flex
mit flexiblem Arm

Sets

REF	Artikel
MF 38000	BSS Set <ul style="list-style-type: none"> • Stabilisierungssystem (REF MF 38000-1) • Schienenklemme für OP-Tisch (REF MF 38000-2) • Aufbewahrungskoffer (REF MF 38100)

REF	Artikel
MF 38310	BSS Flex Set <ul style="list-style-type: none"> • Stabilisierungssystem mit flexiblem Arm (REF MF38300) • Montagestange mit Schienenklemme (REF MF38301) • Aufbewahrungskoffer (REF MF38100)

Vorteile im klinischen Alltag

- **Maximale Genauigkeit:** Vermeidung von Bewegungen reduziert Sampling-Fehler und verkürzt die Eingriffszeit.
- **Effizienzsteigerung:** Befreit das Personal vom Halten des Bronchoskops und ermöglicht einen optimierten Workflow.
- **Strahlenschutz:** Erfüllt ALARA-Prinzipien, da das Team während der Bildgebung Abstand halten kann.
- **Ergonomie & Sicherheit:** Reduziert Belastung und Verletzungsrisiken durch langes Halten des Instruments.
- **Hilfreich bei Schulungen:** Stabilität erleichtert Lehr- und Lernprozesse.
- **Schnelle Einrichtung:** Einfache Montage am Tisch oder Bett für zügige Einsatzbereitschaft.



Kompatibilität

Die Systeme sind für alle gängigen Bronchoskope sowie Bildgebungs- und Navigationsplattformen geeignet, einschließlich:

- Flexible und starre Bronchoskope
- Fluoroskopie (C-Arm), CBCT, CT (intraoperativ)
- eMNS, EBUS, TBLC sowie robotische Bronchoskopie

Komponenten

REF	Artikel
MF 38000-1	BSS mit Scopehalterung (ohne Schienenklemme)
MF 38000-2	Schienenklemme für OP-Tisch
MF 38311	Tischklemme mit Schienensegment, Schiene 6" (152 cm) / Klemmöffnung 1.5" (3,8 cm)
MF 38313	Tischklemme mit Schienensegment, Schiene 6" (152 cm) / Klemmöffnung 3.86" (9.8 cm)
MF 38100	BSS-Aufbewahrungskoffer mit Schaumstoffeinlagen
MF 38300	Flexibler Haltearm für Bronchoskop
MF 38301	Montagegange mit Schienenklemme für flexiblen Haltearm für Bronchoskop
MF 99706-SL	Silikon-Einlagen



Leufen Medical GmbH is part of

bess.group



Mediflex™

Mediflex™ ist ein familiengeführtes US-Unternehmen, das seit 1969 innovative chirurgische Instrumente entwickelt und produziert. Gegründet von David T. Adler, übertrug Mediflex™ erstmals Prinzipien des industriellen Engineerings auf die Medizintechnik – ein Ansatz, der die Entwicklung moderner chirurgischer Stabilisierungssysteme entscheidend geprägt hat.

**Mediflex ist eine Marke der Flexbar® Machine Corp.,
Islandia, NY, USA.**

Die Produkte in diesem Katalog sind CE-gekennzeichnet.



Mediflex Surgical Products — USA



Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen für unsere Produkte; ausschließlich diese sind maßgeblich. Der Abdruck von Hinweisen zur Anwendung der Produkte in diesem Katalog dient lediglich der Verständlichkeit und gibt den Stand der Drucklegung wieder. Fordern Sie im Bedarfsfall eine aktuelle Version an!



a bess group company

Leufen Medical GmbH

Gustav-Krone-Str. 7
D—14167 Berlin
Tel. +49 30 816 90 93 00
Fax +49 30 816 90 93 93
contact@leufen-medical.eu
www.leufen-medical.eu

Bronchoskop- Stabilisierungssysteme (BSS)

